



AEGENBIO Co., Ltd.
#909, 108 Haan-ro, Gwangmyeog-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL +82-70-5158-6308 FAX +82-2-6112-8853

CLAMIGNON

CLAMIGNON®

NOS PREOCUPAMOS
SINCERAMENTE POR TU
SEGURIDAD CON 'PSD™',
NUESTRA FILOSOFÍA.



PSD™
Patient Safety Design

CLAMIGNON® es un producto diseñado con la
seguridad del paciente como máxima prioridad.

CLAMIGNON®

BASÁNDONOS EN PSD, PRODUCIMOS CON ESTRUCTOS ESTÁNDARES DE MATERIAS PRIMAS, GARANTIZANDO UNA ALTA EFICACIA Y NATURALIDAD.



Todos los productos de Clamignon® están diseñados con PSD™ para ofrecer una calidad y unos resultados diferenciados tanto para el operador como para el paciente

CLAMIGNON®


CLAIRE' LUMINOSO Y 'MIGNON' TAN LINDO COMO LA CARA DE UN BEBÉ

Con el significado de 'belleza luminosa y joven', es una marca de relleno inyectable facial que le permite seleccionar productos según el propósito de uso y las indicaciones.



CLAMIGNON®

MAPA DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

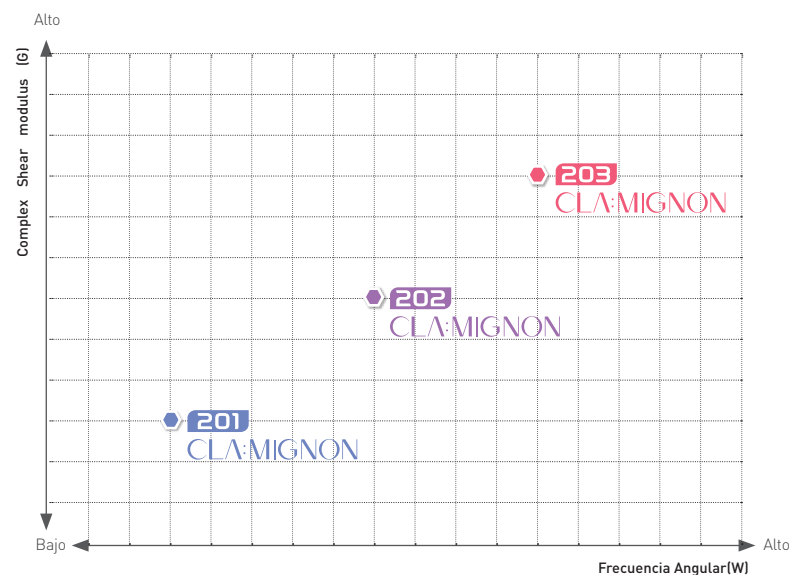


MODELO	Clamignon 201	Clamignon 202	Clamignon 203
COMPOSICIÓN	Reticulado HA 24 mg/mL Lidocaine 0.3%	Reticulado HA 24 mg/mL Lidocaine 0.3%	Reticulado HA 24 mg/mL Lidocaine 0.3%
VOLUMEN	1.0 mL * 1sy / BOX	1.0 mL * 1sy / BOX	1.0 mL * 1sy / BOX
TAMAÑO AGUJA	30G	27G	25G
DURACIÓN varia dependiendo del caso de los pacientes	6~9 meses	9~12 meses	12~18 meses
VISCO NIVEL DE ELASTICIDAD	●●●●	●●●●●	●●●●●●

ENFOQUE 01


Los estrictos estándares dan como resultado un Clamignon® de alta calidad.

PROCESO DE FABRICACIÓN

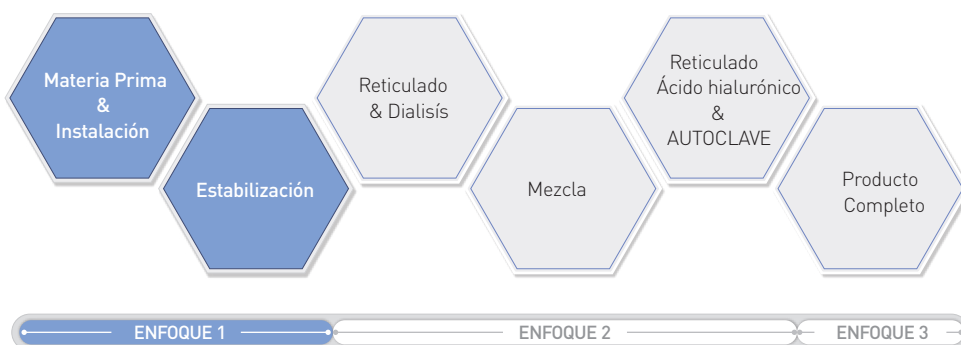

-ESTRICTOS ESTÁNDARES PARA LAS MATERIAS PRIMAS


- Uso de agua de fabricación estandarizada mediante el empleo de materias primas con estándar químico (EP, USP, KP, etc.) y dispositivos propios de nuestro sistema de gestión del agua.
- Seguridad garantizada mediante el uso de materias primas de ácido hialurónico de alta pureza y materias primas utilizadas en medicamentos estandarizados.

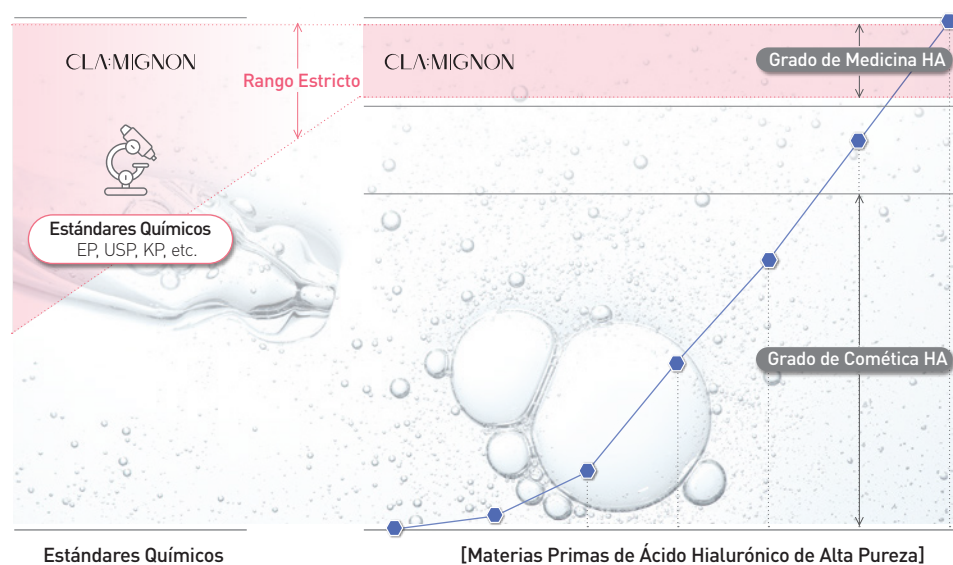

ENFOQUE 02

Clamignon® minimiza los efectos adversos con el diseño de seguridad para el paciente (PSD™).

PROCESO DE FABRICACIÓN

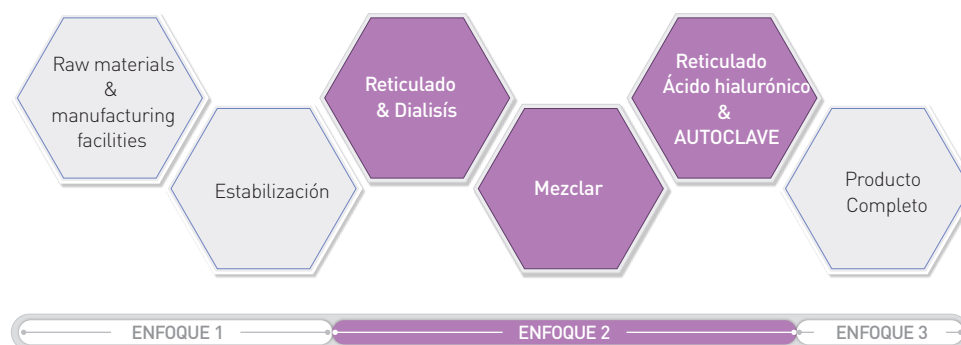


RETICULACIÓN


- La deformación química se minimizó utilizando una pequeña cantidad de agente reticulante a través de un proceso de reticulación a temperatura ambiente durante un largo período de tiempo.
- Diseñado para mantener la cadena larga y natural del ácido hialurónico para una mayor persistencia/duración.
- Los agentes de reticulación parcial o los agentes no reticulantes se minimizan.

DIALISIS

- A través de ocho procesos de diálisis durante un período de 12 días, se aumentó la estabilidad al minimizar el factor de hinchazón (Swelling factor) mediante la eliminación, en la medida de lo posible, de Open BDDE, Free BDDE y subproductos. HA+BDDEHA

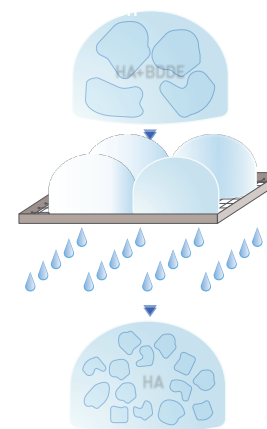


- ▶ DIALISIS: 12 Días
- ▶ Membrana semipermeable / PBS
- ▶ Eliminación de BDDE e impurezas

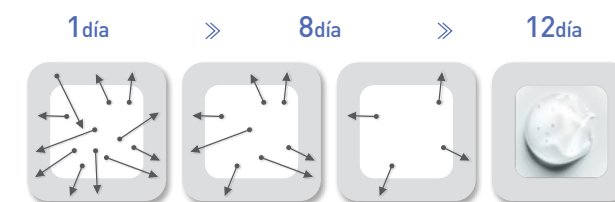

BDDE : Se difunde de alta a baja concentración

Clamignon® minimiza los efectos adversos con el diseño de seguridad para el paciente ②

MANUFACTURING PROCESS

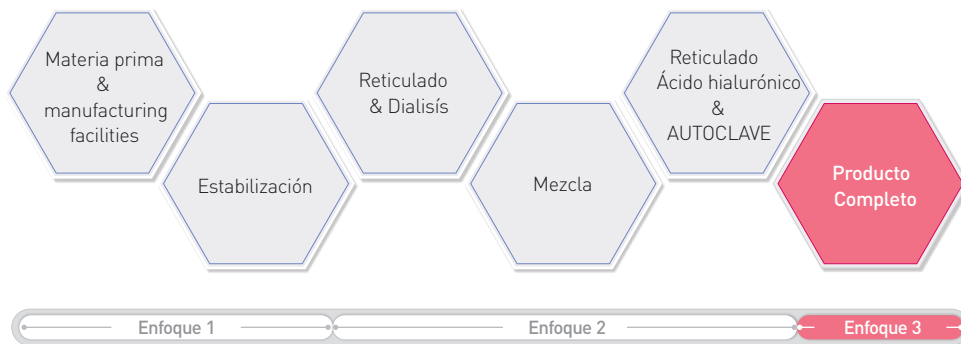

MEZCLA


- Basado en partículas homogeneizadas, se implementó una sensación de inyección estable para aumentar la conveniencia de procedimientos precisos y seguros.
- Contiene lidocaína, un anestésico tópico, para mejorar las molestias causadas por el dolor durante el procedimiento.

RELLENO DE JERINGAS

- La calidad y seguridad del producto han sido mejoradas a través de un proceso de Llenado Aséptico que cumple con regulaciones estrictas como KGMP e ISO 13485.

AUTOCLAVE

- Después de la esterilización a 121°C, se utilizó un método de enfriamiento rápido para minimizar la deformación del producto y aumentar la reproducibilidad del mismo.

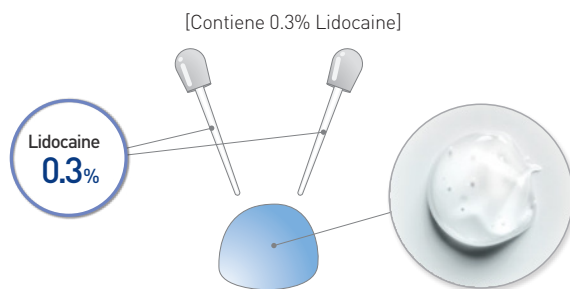

Sistema de llenado Aséptico




CLA:MIGNON

Clamignon® ofrece alta eficacia y resultados naturales para los pacientes

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE EFICACIA Y SEGURIDAD


Reología

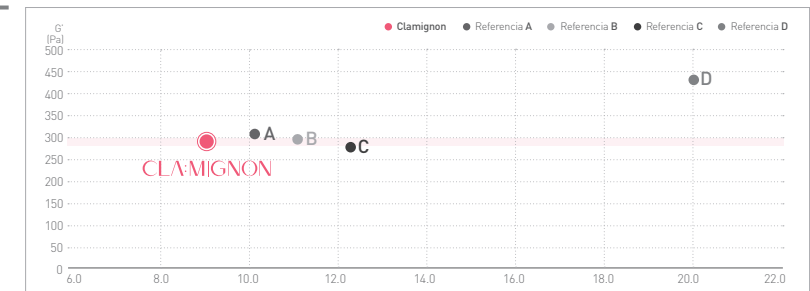

Indicadores de elasticidad y viscosidad

Clamignon tiene un ángulo de fase bajo en comparación con su módulo elástico (G'), lo que lo hace excelente para la formación de moldes durante los procedimientos.

Presión Osmótica

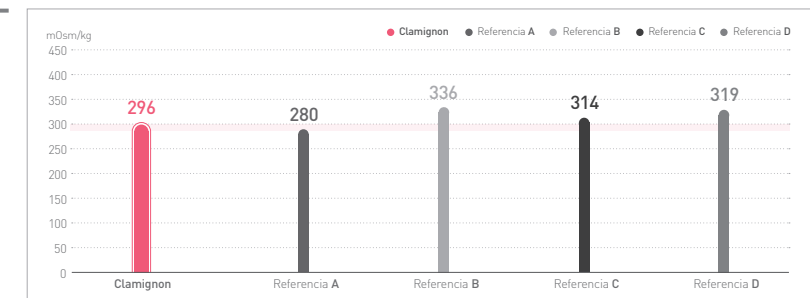

Indicadores de elasticidad y viscosidad

Clamignon se asemeja estrechamente a la presión osmótica del cuerpo humano (300 mOsm/kg), lo que resulta en menos dolor durante los procedimientos y una mínima deformación por hinchazón o contracción después de la inyección.